

Cânula com ponta expansiva, com potencial ablativo de lesão bipolar, projetada com configuração modificada para atingir apenas as zonas de lesão que são específicas aos sinais de dor, resultando em uma lesão muito maior e mais consistente. Compatível com todas as marcas de Eletrodos e Geradores.

APLICAÇÕES

RF Cervical

Na coluna cervical, a tecnologia de grandes lesões auxilia no direcionamento dos nervos sensoriais, que apresentam alta variabilidade nessa região.

RF Torácica

Na coluna torácica, há grande variabilidade na localização dos nervos do ramo medial.

RF Lombar


Os nervos do ramo medial da coluna lombar têm uma grande área para se estender através das vértebras, o que pode dificultar a ablação completa do nervo alvo.

RF Sacro ilíaca

Com alta variabilidade em direção e localização, os nervos do sacro ficam proximais e distais ao forame, bem como anteriores e posteriores.

Genicular RF

Os nervos geniculares variam em localização ao longo do fêmur e da tíbia. O sistema de cânula ponta aberta leva em conta essa variabilidade criando uma grande lesão, expandindo a largura da lesão sem aumentar a distância.

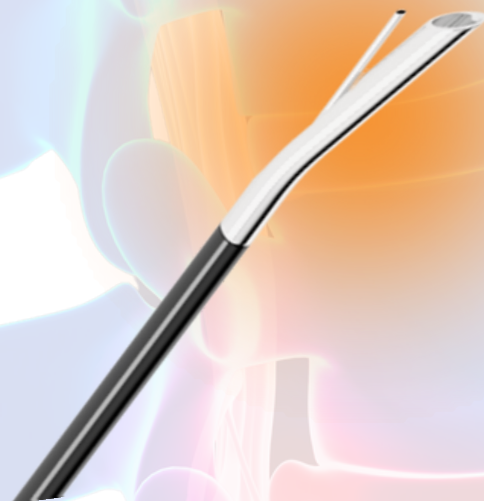

Registro ANVISA: 82240539002

Administração eficiente de Fluidos

A porta lateral da cânula facilita a propagação imediata do fluido mais localmente à ponta exposta. Isto pode proporcionar uma administração mais eficiente na zona de lesão alvo.

Cânula			
Referência	Gauge (GA)	Comprimento	Ponta Ativa
NVT102010D	20	100	10 mm